


JAK UŻYWAĆ SZCZOTECZKI SONICZNEJ?

1.

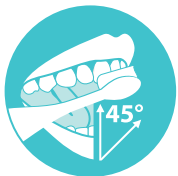

Po nałożeniu pasty, główkę szczoteczki ustaw pod kątem 45 st. do powierzchni dziąseł.

2.



Włącz szczoteczkę i przesuwaj ją powoli po łuku zębowym. Myj zewnętrzną i wewnętrzną stronę łuku zębowego oraz powierzchnie żujące. Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno.

3.



Zalecany czas mycia zębów to 2 min. Większość szczoteczek posiada wbudowany TIMER, który podzieli pracę na 4 30-sekundowe interwały. Każdy interwał przeznaczony jest na umycie kolejnej części uzębienia.

JAKIE PASTY STOSOWAĆ?

Do szczoteczek sonicznych stworzono **dedykowane pasty (sonic friendly)**, np. SEYSSO. Nie zawierają one laurylosiarczanu sodu (SLS).

Pasty bez SLS przy użyciu szczoteczki sonicznej, tworzą pianę o drobniejszych bąbelkach, która lepiej przenosi składniki aktywne.

shop-dent

artykuły do higieny jamy ustnej

KTO MOŻE STOSOWAĆ SZCZOTECZKI SONICZNE?

- ▶ Szczoteczki soniczne są dobre **dla każdego** również **dla dzieci** (dedykowane modele)
- ▶ **Szczególnie** poleca się je osobom:
 - posiadającym aparat ortodontyczny, implanty, korony czy mosty dentystyczne
 - z zapaleniem dziąseł
 - pijącym kawę, herbatę lub palaczom.



MASZ PYTANIA?



bok@shop-dent.pl



22 112 38 38



www.shop-dent.pl

Odwiedź nasz sklep. Sprawdź, gdzie jesteśmy na www.shop-dent.pl/nasze-sklepy.

shop-dent

artykuły do higieny jamy ustnej

Szczoteczki soniczne



*Sięgnij po
uśmiech*

Szczoteczki soniczne - wybierz najlepszą dla siebie

Szczoteczki soniczne precyzyjnie usuwają płytkę bakteryjną, masują dziąsła i mogą lepiej docierać do przestrzeni międzyzębowych.



Główki szczoteczki sonicznej i manualnej są zbliżone kształtem

Porównanie przykładowych modeli



Maksymalna liczba drgań sonicznych na minutę*	96 tys.	62 tys.	96 tys.	62 tys.	80 tys.
Liczba programów pracy	5: Clean, White, Polish, Gum Care, Sensitive	5: Clean, White, Polish, Gum Care, Sensitive	3: Clean, Soft, Whitening	2: Normal, Soft	3: Clean, Whitening, Massage
Czas pracy po pełnym naładowaniu	do 70 dni	do 21 dni	do 60 dni	do 7 dni	do 30 dni
Liczba końcówek w zestawie	3	2	2	2	3
Dodatki	Etui podróżne z funkcją ładowania	Ekskluzywna szklanka ładująca i etui podróżne	Wygodne, kompaktowe etui	Bardzo drobne włókna, funkcja łagodnego startu, wyjątkowo lekka	Gumowa osłonka na tylną część główki
Cena	ok. 700 zł	ok. 700 zł	ok. 450 zł	ok. 300 zł	ok. 240 zł

* Istnieją różne metody liczenia ruchów sonicznych. Dlatego wartości

podane przez producentów mogą się różnić. Przyjmujemy, że 1 ruch soniczny to 2 drgania soniczne.

JAK TO DZIAŁA?



Szczoteczki soniczne, czyli dźwiękowe, wykonują **nawet do 96 000 drgań na minutę**. Dzięki temu pasta miesza się ze śliną i tworzą się mikrobańki, które z dużą prędkością docierają do trudno dostępnych miejsc zęba i dystrybuują aktywne składniki pasty.

Włókna szczoteczki poruszają się ruchem wymiatającym, dzięki czemu świetnie masują dziąsła, są delikatne i bezpieczne.



Miejsce na notatki

.....

.....

.....

.....

.....

.....