

S·E·Y·S·S·O

SZCZOTECZKA SONICZNA **SEYSSO PROFESSIONAL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



10
KROKÓW
DO BIELSZEGO
UŚMIECHU

strona 8

Droga Klientko, Kliencie S·E·Y·S·S·O,
dziękujemy za wybór naszej marki!





Gratulujemy, ponieważ właśnie uczyniłeś pierwszy krok w drodze do zdrowych i bielszych zębów!

Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL łączy w sobie funkcjonalność i staranność wykonania.

Została starannie zaprojektowana przez europejskich lekarzy dentyków, tak aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie zupełnie nową jakość szczotkowania.

Jej powłoka wykonana jest z wysokiej jakości, przyjemnego w dotyku materiału. Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL posiada delikatne i miękkie włókna, które poruszają się z dużą prędkością zapewniając doskonałe rezultaty mycia zębów.

Aby bezpiecznie korzystać z rewelacyjnej technologii sonicznej oferowanej przez S·E·Y·S·S·O, uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem szczoteczki!

ELEMENTY ZESTAWU

- 2 końcówki
- Rękojeść
- Stacja ładująca z dwoma miejscami na końcówki
- Magnetyczne Etui Podróżne z funkcją ładowania przez kabel USB
- Kabel USB

PODŁĄCZANIE I ŁADOWANIE

- Umieść Szczoteczkę na ładowarce i podłącz wtyczkę ładowarki do kontaktu.
- Dioda wskaźnika ładowania (Charge) powinna się zaświecić.
- Migająca dioda (Charge) sygnalizuje ładowanie. Jeśli dioda świeci ciągłym światłem oznacza to, że szczoteczka została naładowana w pełni.
- Pierwsze pełne ładowanie zajmuje co najmniej jedną dobę i starcza do 6 tygodni, czyli 84 cykle szczotkowania.
- Każde kolejne ładowanie powinno trwać maksymalnie do jednej doby.
- Podczas ładowania można zdjąć szczoteczkę z ładowarki na czas mycia zębów.
- Po dwuminutowym czasie mycia zębów możesz odstawić szczoteczkę na ładowarkę ponownie.
- Nie ma ryzyka przeładowania baterii.
- Nie zaleca się rozładowywania baterii do końca, dlatego rekomendujemy ładowanie jej co 4-5 tygodni.

UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI SONICZNEJ SEYSSO PROFESSIONAL

Umieść końcówkę na rękojeści. Następnie, nałóż odpowiednią ilość pasty na włókna szczoteczki. Rekomendujemy stosowanie pasty dedykowanej dla szczoteczek sonicznych (Sonic-Friendly). Polecamy pasty SEYSSO, które dzięki idealnemu składowi i konsystencji w pełni wykorzystują potencjał szczoteczek sonicznych. Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL została zaprojektowana tak, aby dokładnie oczyszczać zęby w ramach zalecanego przed lekarzy dentystów czasu szczotkowania. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i jest gotowe do ponownego użycia.

Nakładanie i zdejmowanie końcówki

Końcówki szczoteczki muszą być ściśle dopasowane do rękojeści, aby przenosić szybkie ruchy i w pełni wykorzystać moc działania technologii sonicznej. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy nanieść cienką warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści, aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie końcówki. Rekomendujemy wymianę końcówek co 3 miesiące.

Innowacyjna prędkość

Trzy tryby pracy pozwalają na dostosowanie szczoteczki do Twoich indywidualnych potrzeb. Szczoteczka porusza się aż w trzech prędkościach wykonując 62 000, 82 000 lub 96 000 ruchów na minutę w ramach trybów: Soft, Clean i Whitening.



JAK ZMIENIAĆ TRYBY PRACY:

Przycisk wyboru trybu pracy kontroluje też włączanie i wyłączanie szczoteczki. Dzięki niemu możemy zmieniać prędkość pracy kolejno między: Clean, Soft i Whitening. Użyj przycisku, żeby włączyć urządzenie, następnie naciskaj dalej, by przechodzić między trybami pracy szczoteczki. Jeżeli tryb będzie aktywny więcej niż 5 sekund, następane użycie przycisku wyłączy urządzenie.

Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL włącza się w trybie Clean.

- Żeby przejść z trybu Clean na tryb Soft naciśnij przycisk wyboru funkcji pracy drugi raz.
- Żeby przejść do trybu Whitening naciśnij go jeszcze raz.
- Dioda wskaźnika trybu pracy pokazuje, który tryb jest aktualnie stosowany.
- Po 5 sekundach następuje zapamiętanie trybu pracy i kolejne użycie przycisku wyłączy szczoteczkę.





KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

- Po każdym umyciu zębów, opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą.
- Zdejmij końcówkę z rękojeści i opłucz ją pod bieżącą wodą po każdym myciu zębów.
- Po każdym myciu zębów zdejmij ze szczoteczki końcówkę i oczyść nasadę rękojeści, aby pozbyć się osadu i resztek pasty do zębów.
- Zanim przystąpisz do czyszczenia ładowarki, upewnij się, że jest ona odłączona od zasilania. Do wycierania powierzchni ładowarki używaj tylko suchej szmatki!

Ważne: Nie myj ładowarki pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie.

- Trzymaj ładowarkę w czystym i bezpiecznym miejscu.
- Nie podłączaj ładowarki do prądu dopóki nie jest zupełnie sucha.

W przypadku jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, szczególnie w obecności dzieci, powinny być zawsze przestrzegane podstawowe środki ostrożności.

Szczoteczka jest zgodna z odpowiednimi paragrafami wymogów obowiązujących na terenie USA, m.in. Code of Federal Requirements 21, rozdział 1, podrozdział J, zdrowie radiologiczne. Szczoteczka zawiera ładowalne baterie (akumulator) w trosce o ochronę środowiska.

10 KROKÓW DO BIELSZEGO UŚMIECHU

1

Nałóż odpowiednią ilość swojej ulubionej pasty na końcówkę szczoteczki.

2

Ustaw szczoteczkę pod kątem 45 stopni do linii dziąseł.

3

Przygotuj się na niezapomniane przeżycie!

4

Włącz urządzenie.

5

Zacznij od szczotkowania prawej lub lewej części górnego łuku zębowego.

6

Pamiętaj, by dokładnie szczotkować wszystkie powierzchnie zębów. Przesuwaj szczoteczkę wzdłuż zębów i okolicy dziąseł. Delikatnymi ruchami czyść powierzchnie żujące.

7

Nie szoruj – pozwól szczoteczce wykonać całe zadanie.

8

Po 30 sekundach automatyczny timer zatrzyma na chwilę ruch szczoteczki, w tym czasie przenieś końcówkę na kolejną partię uzębienia.

9


Szczotkuj po kolei wszystkie obszary, najpierw górnego, następnie dolnego łuku zębowego.

10

Myj zęby dwa, trzy razy dziennie przez dwie minuty.

MAGNETYCZNE ETUI PODRÓŻNE

Eleganckie etui z zamknięciem magnetycznym posiada również funkcję ładowarki. Pozwala na ładowanie szczoteczki poprzez kabel USB według upodobania z laptopa, komputera.

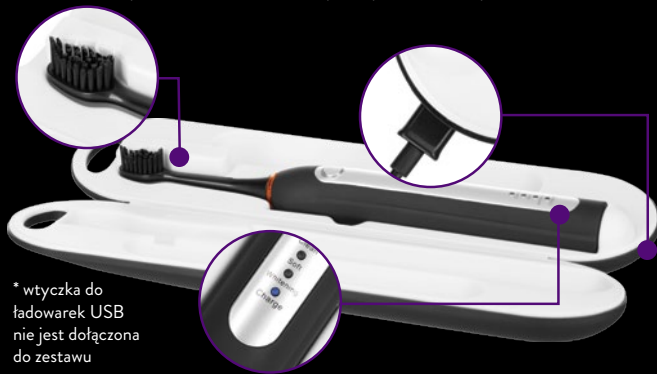

* wtyczka do ładowarek USB nie jest dołączona do zestawu

Działanie:

1. Otwórz górną część etui i umieść rękojeść w środku.
2. Podłącz etui do interfejsu USB lub do wtyczki do ładowarek USB*.
3. Ładuj przez jedną dobę. Dioda wskaźnika ładowania powinna świecić przez cały czas.

Etui korzysta ze standardowego portu USB. Jest kompatybilne z rękojeścią Szczoteczki Sonicznej SEYSSO PROFESSIONAL.

Ostrzeżenia!

- Nie przechowuj etui tam, gdzie jest narażone na upadek lub kontakt bezpośredni z wodą.
- Nie wrzucaj i nie zanurzaj etui w wodzie. W razie zamoczenia odłącz od zasilania.
- Nie stosuj podczas kąpieli.
- Nie sięgaj po etui, które wpadło do wody lub innego płynu. Odłącz przed oczyszczeniem i upewnij się, że etui jest suche zanim podłączysz je do prądu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wymiary 298.8 mm(dł.) x 75 mm(szer.) x 40 mm(wys.)

Waga 235 g (+/- 0,5 g)

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!

ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ

Tylko do użytku domowego:

- Szczoteczka jest wyposażona w wodoszczelną rękojęść. Jest bezpieczna i zaprojektowana do użytkowania w łazience. Szczoteczka posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
- Pamiętaj: szczoteczka nie jest przystosowana do pracy pod wodą!
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z S·E·Y·S·S·O.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z S·E·Y·S·S·O.
- W razie upuszczenia, wymień końcówkę przed następnym użyciem. Nawet jeżeli zniszczenie nie jest widoczne.



OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- Nie stosuj podczas kąpieli.
- Nie przechowuj etui tam, gdzie jest narażone na upadek lub ma bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie wrzucaj i nie zanurzaj etui w wodzie lub innym płynie.
- Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do S·E·Y·S·S·O.

Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:

- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
- Produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli szczoteczka jest stosowana przez dziecko lub w jego obecności.
- Stosuj zgodnie z jej przeznaczeniem. Stosuj jedynie akcesoria polecane przez producenta.
- Nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni lub zanurzeniu w wodzie szczoteczka nie pracuje prawidłowo, odeślij ją do miejsca zakupu.
- Nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przycinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj szczoteczki podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie odłączaj ładowarki od prądu ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- Nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.
- Nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozowane na działanie aerozoli lub czystego tlenu.
- Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. Zapoznaj się z jej specyfikacją.

DWULETANIA GWARANCJA

Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL jest objęta gwarancją na okres dwóch lat od daty dokonania zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Pamiętaj, żeby zachować dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W ramach okresu objętego gwarancją kupujący może zgłosić roszczenie do miejsca zakupu tylko, jeżeli produkt był używany prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja NIE obejmuje:

1. Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
2. Uszkodzeń wynikających z:
 - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia.
 - b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt
 - c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu
 - d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez S·E·Y·S·S·O.

Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Wszelkie zadrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania i tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki.

Szczoteczka

Model: PST/SCST10

Magnetyczne Etui Podróżne

Model: PTC



K-Trade Karol Kowalczyk, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, Polska, MADE IN P.R.C

www.seyso.com