


WATERPIK® WATER FLOSSER WP-100

INSTRUKCJA OBSŁUGI IRYGATORA WP-100 E ULTRA

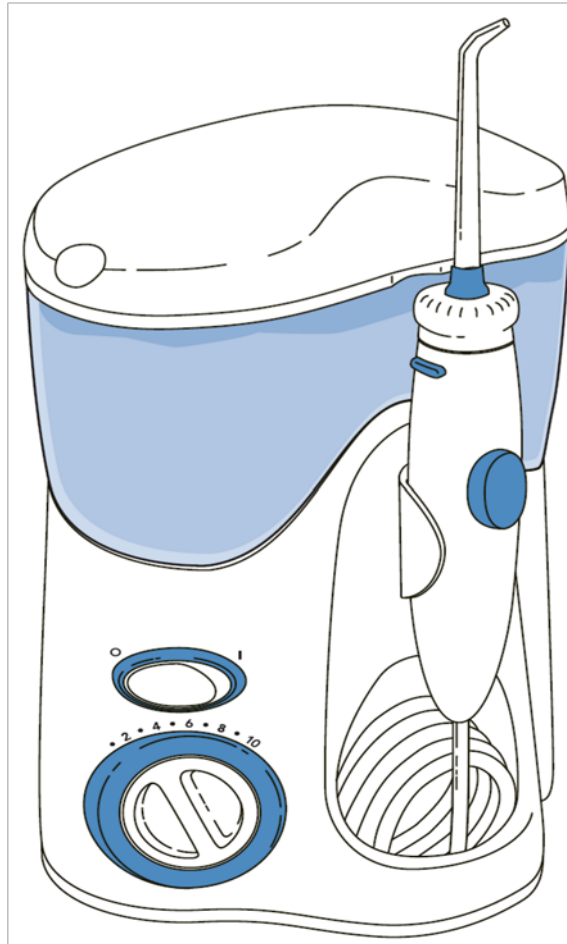

Irygator WATERPIK pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz usunąć resztki pożywienia i bakterie z tych przestrzeni jamy ustnej, do których normalne środki do płukania i czyszczenia nie mogą dotrzeć.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY:

1. Zawsze po użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
3. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
4. Nie używać podczas kąpieli.
5. Nie stawiać urządzenia w miejscu, z którego może spaść do wanny, umywalki lub kabiny prysznicowej.
6. Nie dotykać urządzenia, które wpadło do jakiegokolwiek płynu. Należy je jak najszybciej wyłączyć z gniazdka.
7. Przed pierwszym użyciem, a następnie okresowo należy sprawdzać, czy przewód sieciowy nie został uszkodzony.

UWAGA! W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB USZKODZEŃ CIAŁA NALEŻY:

1. Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka o innym napięciu niż przypisane do tego urządzenia (240V).
2. Nie używać urządzenia w przypadku, gdy: ma uszkodzony przewód, lub wtyczkę, gdy nie funkcjonuje prawidłowo, gdy zostało zniszczone lub upuszczone do płynu. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Nie należy kierować strumienia wody bezpośrednio pod język, do ucha, nosa ani do innych, delikatnych miejsc. Urządzenie to jest zdolne do wytworzenia ciśnienia, które może powodować uszkodzenia w tych obszarach. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi, celem zdobycia informacji na temat odpowiedniego używania produktu.
4. Należy używać urządzenie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją lub zalecany przez stomatologa.
5. Używać wyłącznie z końcówkami i akcesoriami zalecanymi przez Waterpik Technologies.
6. Należy napełniać zbiornik wodą lub płynami przepisany przez stomatologa. Płynu należy używać w stosunku 1:1
7. Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
8. Należy trzymać przewód z daleka od nagrzewanych powierzchni.
9. Nie włączać ani nie używać w miejscu, gdzie stosowany jest tlen lub preparaty w aerozolu.
10. Nie używać płynów do ust/ płukanek zawierających Jod, wybielacze lub olejek z drzewa herbacianego.
11. Przed zastosowaniem urządzenia powinno się usunąć biżuterię z jamy ustnej.
12. Nie należy używać urządzenia w przypadku posiadania ran w jamie ustnej.
13. Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie antybiotyku przed wykonywaniem wszelkich czynności dentystrycznych, należy skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem tego urządzenia.
14. Do użytku domowego. Nie należy używać poza domem.
15. Należy dokładnie poinstruować dzieci oraz osoby specjalnej troski o właściwym sposobie użytkowania.



UWAGA:

1. Nie należy odłączać miękkiej nakładki od przezroczystej końcówki do kieszonek dziąsłowych (Pik Pocket)
2. Nie należy używać urządzenia dłużej niż przez 5 minut i częściej, niż co 2 godziny.
3. Należy upewnić się, czy dzieci nie bawią się urządzeniem.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĄ INSTRUKCJĘ.


artykuły do higieny jamy ustnej

OPIS PRODUKTU

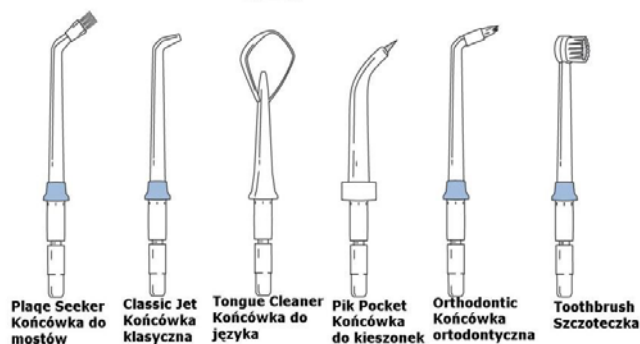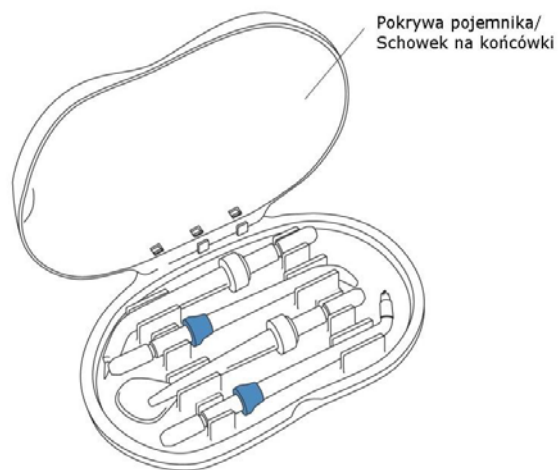

shop-dent
artykuły do higieny jamy ustnej

ABY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE NALEŻY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WŁĄCZYĆ WTYCZKĘ DO KONTAKTU.

1. PRZYGOTOWANIE ZBIORNIKA:

Zdejmij zbiornik i pokrywę z bazy. Napełnij zbiornik letnią wodą. Nałóż pełny zbiornik na bazę i przykryj pokrywką.

2. NAKŁADANIE I ZDJEMOWANIE KOŃCÓWEK:

Włóż końcówkę w otwór znajdujący się na środku pokrętki na ręczce. Aby wyjąć końcówkę z rękojeści należy nacisnąć przycisk na rękojeści i lekko pociągnąć końcówkę.

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE:

Podczas pierwszego uruchomienia należy ustawić ciśnienie na najwyższą pozycję (10) na pokrętkle z regulacją ciśnienia (1-10) i skierować końcówkę irygatora do zlewu. Następnie należy uruchomić irygator za pomocą włącznika (0/I) - ustawiając pozycje włączenia (I) i w ten sposób opróżnić irygator z całej wody.

UWAGA: Nie należy wykonywać tej czynności z końcówką Pik Pocket, ponieważ stosuje się ją wyłącznie przy niskim ciśnieniu.


4. REGULOWANIE CIŚNIENIA:

Podczas pierwszego użycia irygatora nastaw pokrętko regulujące ciśnienie na pierwszy poziom. Stopniowo zwiększaj ciśnienie na pokrętkle wedle swoich preferencji.


5. UMIESZCZANIE W JAMIE USTNEJ:

Umieść rękojeść z końcówką w ustach i pochyl się nad umywalką. Ustaw pokrętko zmiany ciśnienia (1-10) na najniższe (1) i włącz przycisk włącznika (0/I) na pozycje włączenia (I). Woda powinna swobodnie spływać do umywalki. Aby dokładnie dotrzeć do odpowiednich miejsc przekręć pokrętko na górze rękojeści. Po zakończeniu irygacji przełącz przycisk włącznika na pozycję (0).


1

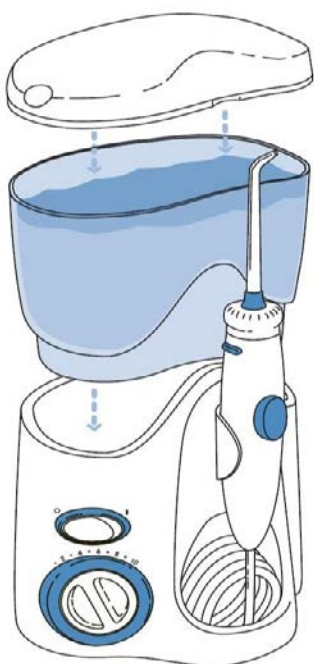

2

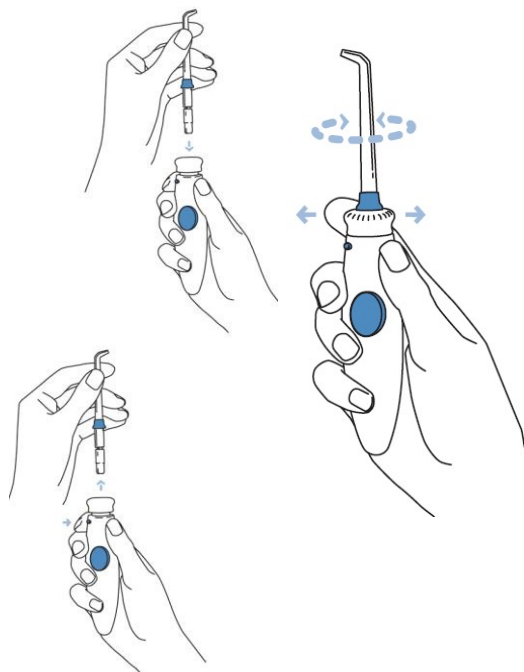

3,4,5


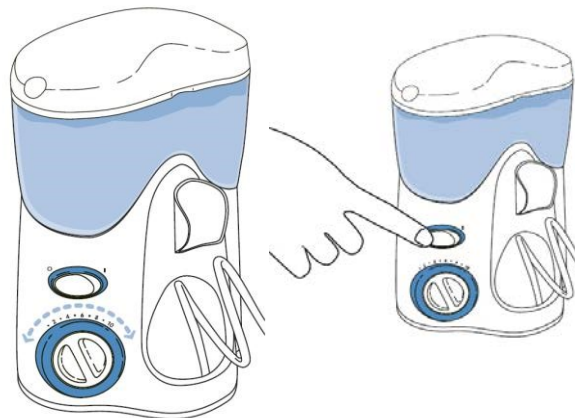


shop-dent

artykuły do higieny jamy ustnej

ZALECANA TECHNIKA UŻYCIA

Skierować strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł. Blisko ust, by uniknąć chlapania wodą, ale tak, by woda mogła swobodnie przepływać z ust do zlewu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zacząć od tylnych części jamy ustnej i płynnie przechodzić w kierunku przednich. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymując ruch, na krótko, między zębami. Kontynuuj proces, dopóki nie oczyścisz wewnątrz i na zewnątrz zarówno górne, jak i dolne zęby.

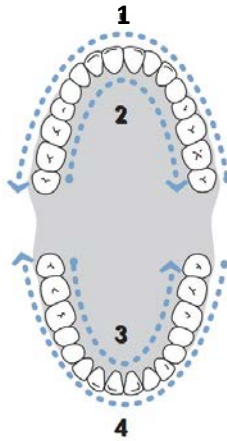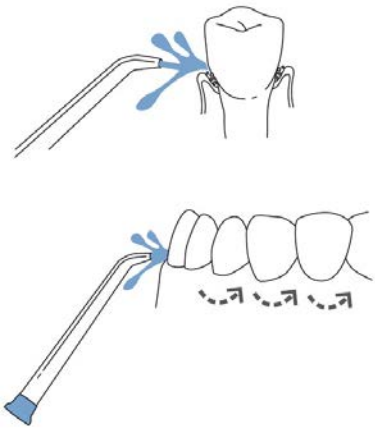


ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu irygacji wyłącz urządzenie (ustaw WŁĄCZNI/WYŁĄCZNIK na pozycji 0) i opróżnij pojemnik.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA KOŃCÓWEK


Końcówka PikPocket™ PP-100 zaprojektowane, by jak najdokładniej czyścić kieszenie dziąsłowe. Dzięki delikatnej końcówce zakończonej gumową nakładką nie ma ryzyka uszkodzenia dziąseł. Umożliwiają proste i skuteczne wprowadzenie roztworu leczniczego bezpośrednio pod linię dziąseł lub do kieszeni przyzębowych. By prawidłowo użyć końcówki PikPocket należy umieścić gumową końcówkę przy zębie pod kątem 45-stopni, a następnie delikatnie przysunąć do linii dziąseł i kontynuować wzdłuż niej. urządzenie, wcześniej ustawiając na najniższe ciśnienie
UWAGA: Tej końcówki należy używać wyłącznie na najniższym ciśnieniu.

Zaleca się wymianę końcówek co **3 miesiące**.

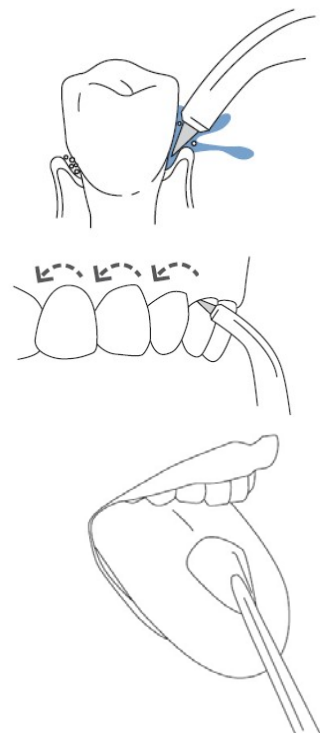


Końcówka Tongue Cleaner TC-100, do języka: należy umieścić końcówkę na języku, a następnie włączyć irygator korzystając z najniższego poziomu ciśnienia (można zwiększyć je w trakcie czyszczenia). Umieść końcówkę na środku języka i delikatnie przyciskając, przesuwaj ją w stronę otworu gębowego.

Końcówka Orthodontic OD-100, ortodontyczna zaprojektowana tak, by równocześnie szczotkować i strumieniem wody pod ciśnieniem usuwać trudno dostępne zanieczyszczenia z klamerek aparatu. Należy rozpocząć czyszczenie od tylnych zębów, umieszczając końcówkę pod kątem 90-stopni do zębów. Delikatnie przesuwaj wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na krótko, by delikatnie szczotkować powierzchnię aparatu i przestrzenie międzyzębowe. Tak postąpić z każdym zębem, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.

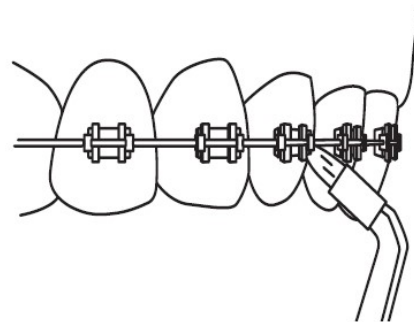


Końcówka Toothbrush TB-100, szczoteczka:

Umieścić końcówkę w ustach główką na zębach i linii dziąseł. Szczoteczka może być stosowana z lub bez pasty do zębów. Włącz urządzenie, tak by woda przepływa przez środek końcówki. Stosując lekki nacisk (włosie nie powinno być wygięte) ruszaj szczoteczką po zębach w przód i w tył. Powtórz z każdym zębem zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej. Woda będzie przepływać przez środek szczoteczki, aby wspomóc jednocześnie czyszczenie i płukanie powierzchni zęba.

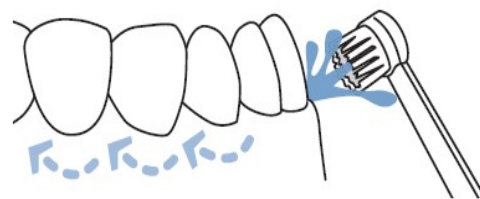

Końcówka Plaque Seeker® PS-100 do implantów, koron, mostów: umieść końcówkę pod kątem 90-stopni do linii dziąseł. Zaczynaj czyszczenie od tylnych zębów, przesuwając się w kierunku przednich. Umieścić końcówkę blisko zębów tak, aby włosie delikatnie dotykało zębów. Delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na krótko między zębami delikatnie myjąc powierzchnię włosiem i pozwalając wodzie płynąć między zębami. Powtórz z każdym zębem zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.

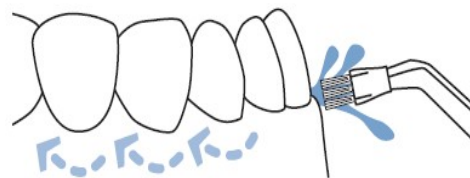


UŻYWANIE PŁYNÓW DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ I INNYCH SPECYFIKÓW

Twój Waterpik® może być używany do dostarczania do jamy ustnej płynu do płukania lub innych przeciwbakteryjnych rozwiązań. Zwróć się do stomatologa, by zalecił odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Uwaga: korzystanie z niektórych antybakteryjnych kosmetyków może skrócić żywotność urządzenia.

Po użyciu płynu do płukania lub innego specyfiku w zbiorniku należy go dokładnie wypłukać ciepłą wodą z kranu (następnie przepłukać przewody wypełniając połowę zbiornika ciepłą wodą, kierując końcówkę w stronę kranu i włączając urządzenie na tak długo, by opróżnić pojemnik).

Czyścić urządzenie w razie potrzeby za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnym płynem do mycia. Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

ZALECANA WYMIANA KOŃCÓWEK:

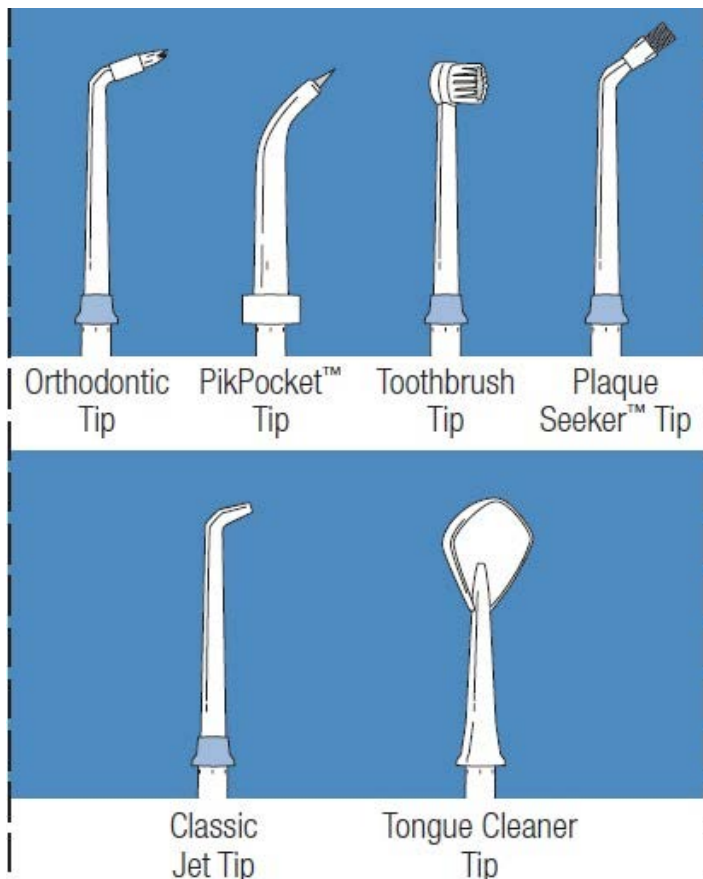

ZALECANA WYMIANA, CO 3 MIESIĄCE

ZALECANA WYMIANA, CO 6 MIESIĄCY

MOŻLIWE PROBLEMY:

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Przeciek między końcówką, a rączką	Końcówka nie jest włożona prawidłowo	Wyjmij końcówkę i włóż ją ponownie dociskając
Przeciek w pojemniku	Brak uszczelki/Uszkodzona uszczelka	Skontaktuj się, ze sprzedawcą
Nieprawidłowe ciśnienie	Pojemnik nie jest we właściwej pozycji/Końcówka jest zatkana przez kamień	Dociśnij pojemnik do bazy/wymień końcówkę
Urządzenie nie działa	Silnik nie działa	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu/ Gniazdko działa prawidłowo

SERWIS I GWARANCJA 24 miesiące

Urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Okres gwarancji, jakim jest objęte urządzenie, wynosi 24 miesiące. Do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest dowód zakupu (paragon lub faktura). Shop Dent Wojciech Madej naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z: Shop Dent Wojciech Madej ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, tel. +48 795689383, e-mail: reklamacje@shop-dent.pl w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.