




PULSONIC

powered by **BRAUN**

S 26.523.3

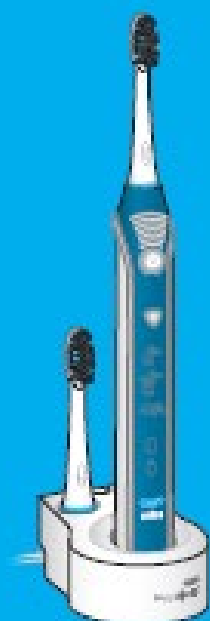






Instrukcja - polska wersja językowa



Szczoteczka Oral-B Pulsonic została starannie zaprojektowana, aby zaoferować Tobie i Twojej rodzinie wyjątkowe doznanie, które jest zarówno bezpieczne jak i skuteczne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

Ważne:

- Okresowo sprawdzaj czy przewód nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony oddaj ładowarkę do Centrum Serwisowego Oral-B Braun. Nie wolno używać uszkodzonego lub niesprawnego urządzenia.
- Niniejszy wyrób nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci poniżej trzeciego roku życia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, jeżeli nie są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Zaleca się przechowywać produkt z dala od dzieci.
- Jeżeli produkt zostanie upuszczony, przed ponownym użyciem należy wymienić końcówkę szczoteczki, nawet jeżeli nie są widoczne jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie należy umieszczać bądź przechowywać ładowarki w miejscu, z którego może zostać strącona do wanny bądź umywalki.
- Nie wolno umieszczać ładowarki w wodzie lub innych cieczach.
- Jeżeli ładowarka wpadnie do wody, nie należy po nią sięgać, ale niezwłocznie odłączyć od zasilania.
- Nie należy samemu modyfikować i naprawiać produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem bądź inne obrażenia. W sprawie jakichkolwiek napraw prosimy skontaktować się z dostawcą lub z Centrum Serwisowym Oral-B Braun. Nie rozmontowywać produktu, poza przypadkiem, kiedy usuwana jest bateria.
- Kiedy bateria jest wyjmowana w celu jej usunięcia (utylicacji), należy uważać, aby nie zewrzeć ze sobą końcówki dodatniej (+) i ujemnej (-).
- Nie wkładać żadnych przedmiotów, w którykolwiek z otworów urządzenia/ładowarki.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Podczas rozłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za przewód.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wolno używać końcówek lub zasilaczy niezalecanych przez producenta.
- Jeżeli użytkownik jest w trakcie leczenia stomatologicznego, przed użyciem szczoteczki należy skonsultować się ze swoim lekarzem stomatologiem.

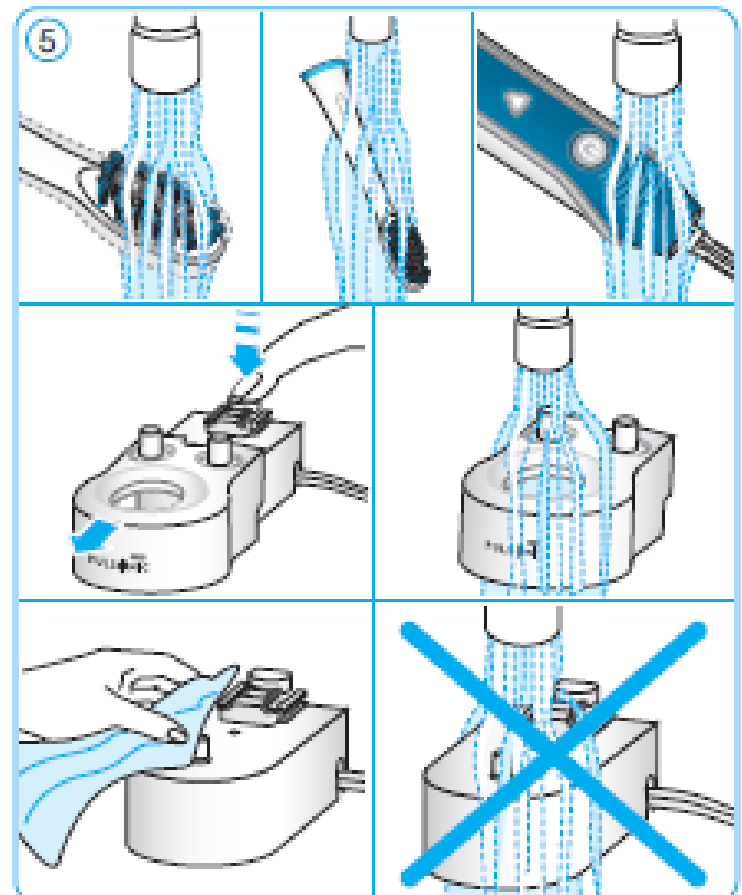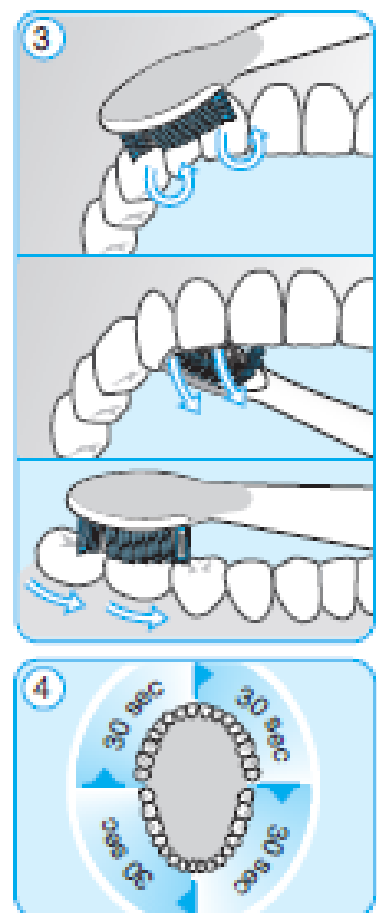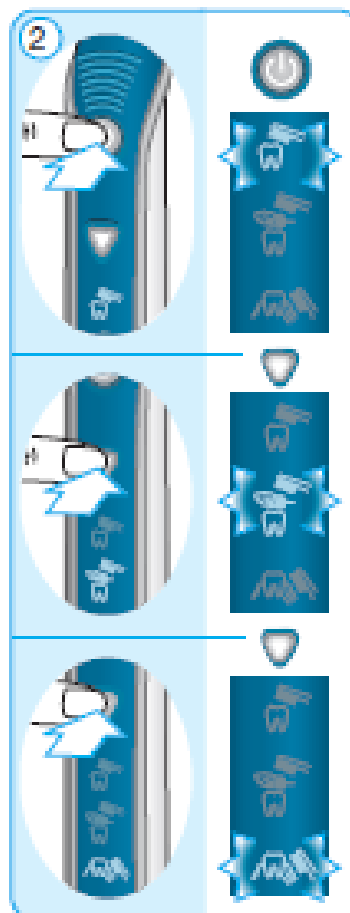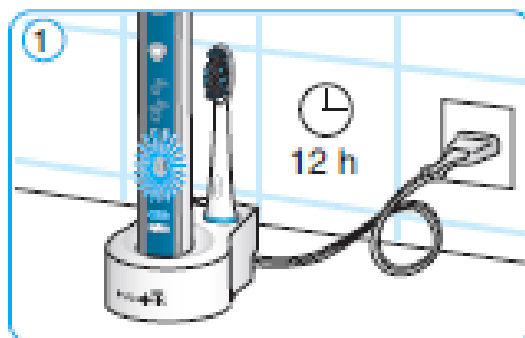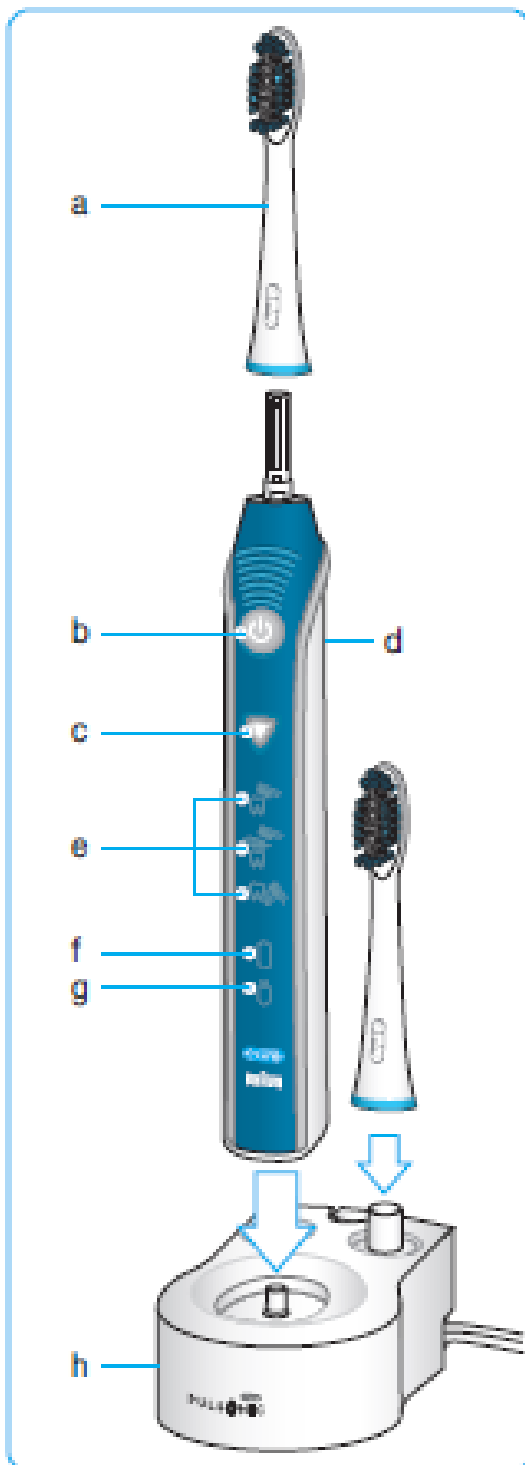

Opis:

A – Końcówka Oral-B Pulsonic

B – Włącznik/Wyłącznik

C – Wybór trybu pracy

D – Rączka

E – Wskaźnik trybu pracy

F – Wskaźnik naładowania baterii

G – Kontrolka niskiego stanu naładowania baterii

H – Ładowarka

Podłączanie i ładowanie:

Szczoteczka posiada wodoodporną rączkę i została zaprojektowana do użycia w łazience.

- Podłączyć podstawową ładowarkę do gniazdka elektrycznego i umieścić rączkę szczoteczki w łazience.
- Podczas ładowania szczoteczki miga zielony wskaźnik ładowania. Gdy szczoteczka jest naładowana zielone światło wskaźnika ładowania baterii świeci się nieprzerwanie przez 5 sekund, a następnie gaśnie. Pełne naładowanie baterii zajmuje przynajmniej 12 godzin i wystarcza na około 1 tydzień regularnego szczotkowania (dwa razy dziennie po dwie minuty).
- Gdy bateria jest rozładowana, po uruchomieniu mruga czerwone światełko wskaźnika wyczerpania baterii, a dodatkowo usłyszymy dźwięk przypominający o naładowaniu szczoteczki.
- Do codziennego użytku, rączkę szczoteczki można trzymać na ładowarce, tak aby zawsze była w pełni naładowana. Nie istnieje ryzyko przeładowania baterii. Jednakże, z powodów związanych z ochroną środowiska, Oral-B zaleca odłączyć ładowarkę, aż do czasu, kiedy wymagane będzie następne ładowanie.
- Aby zachować maksymalną pojemność akumulatora, należy co 6 miesięcy odłączyć ładowarkę i całkowicie rozładować urządzenie podczas jego normalnego użytkowania.

Używanie Twojej szczoteczki:

W zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać różne tryby pracy.

Tryby szczotkowania:

Daily Clean – Wyjątkowe czyszczenie jamy ustnej

Sensitive – Delikatne, lecz dokładne czyszczenie wrażliwych miejsc.

Massage – Delikatny masaż dziąseł.

Jak zmieniać programy szczotkowania:

- Naciśnięcie włącznika/wyłącznika spowoduje uruchomienie szczoteczki w trybie codziennego czyszczenia.
- Aby zmienić na program do zębów wrażliwych (Sensitive) lub program do masażu (Massage) sukcesywnie wciskaj przycisk włącznika/wyłącznika.
- Aby powrócić z każdego innego trybu pracy do trybu codziennego czyszczenia wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu pracy. Twoja szczoteczka zapamięta wybrany tryb i przy ponownym włączeniu szczoteczki rozpocznie pracę w tym trybie. Po przerwie dłuższej niż 30 sekund szczoteczka zmieni automatycznie tryb pracy na codziennie czyszczenie.
- Aby wyłączyć szczoteczkę naciśnij przycisk on/off.
- Aktualny tryb pracy wyświetlany jest na trzonku szczoteczki podczas czyszczenia.

Technika czyszczenia:

Nałóż końcówkę na szczoteczkę. Następnie zmocz włosię szczoteczki i nałóż pastę. Aby zapobiec ochłapaniu łożyska włóż szczoteczkę dopiero, gdy znajduję się w jamie ustnej. Szczotkowanie rozpocznij od zewnętrznej powierzchni górnych zębów, wykonując lekko okrężne ruchy. Po kilku sekundach przesunij główkę szczoteczki do następnej sekcji. Myjąc powierzchnię wewnętrzną i żującą, wykonuj ten sam ruch. Po zakończonym myciu wyłącz szczoteczkę przed wyjęciem jej z jamy ustnej.

Przez pierwsze kilka dni używania szczoteczki elektrycznej możesz doświadczyć lekkiego uczucia łaskotania lub mrowienia. Uczucie to ustąpi kiedy Twoje zęby i dziąsła przyzwyczają się do szczoteczki, Oral-B Pulsonic. Może także wystąpić lekkie krwawienie dziąseł. Zwykle ustępuje ono jednak po kilku dniach. Jeżeli po upływie 2 tygodni krwawienie wciąż występuje, należy skonsultować się ze swoim dentystą. Jeżeli posiadasz wrażliwe zęby lub dziąsła, Oral-B zaleca stosowanie trybu Sensitive do wrażliwych zębów i dziąseł.

Końcówki wymienne:

Końcówka Oral-B Pulsonic jest rekomendowana przez stomatologów do codziennego czyszczenia jamy ustnej. Jej włókna zapewniają dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, powierzchni zębów i wzdłuż linii dziąseł. Niebieskie włókna (INDICATOR), znajdujące się w tych końcówkach, pomagają kontrolować stopień zużycia końcówki. Przy prawidłowym szczotkowaniu, dwa razy dziennie po dwie minuty, jasnoniebieski kolor wyblaknie do połowy po około 3 miesiącach, co oznacza, że czas wymienić końcówkę.

Profesjonalny Regulator Czasowy:

Profesjonalny timer pomoże Ci równomiernie czyścić wszystkie 4 ćwiartki jamy ustnej. Krótki przerywany dźwięk co 30 sekund przypomina, abyś równomiernie szczotkował wszystkie cztery kwadranty linii zębowej. Pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje wyczyszczenie jednej ćwiartki. Długi przerywany dźwięk oznacza, że upłynął zalecany przez dentystów czas szczotkowania wynoszący 2 minuty. Upływający czas szczotkowania jest zapamiętywany, gdy rączka jest na krótko wyłączona podczas szczotkowania. Gdy pauza jest dłuższa niż 30 sekund regulator czasowy się resetuje.

Czyszczenie urządzenia:

Po szczotkowaniu, delikatnie przepłucz włączoną szczoteczkę pod bieżącą wodą przez kilka sekund. Wyłącz rączkę i usuń główkę szczoteczki. Myj obie części osobno pod bieżącą wodą. Następnie wytrzyj do sucha zanim ponownie zamontujesz szczoteczkę. Rozłącz ładowarkę przed czyszczeniem. Nigdy nie umieszczaj ładowarki w wodzie lub zmywarce. Ładowarkę należy czyścić wyłącznie wiglotną ściereczką. Uchwyt rączki szczoteczki może być myty w zmywarce.

Niniejszy produkt zawiera akumulator. Zużytego sprzętu nie należy wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w autoryzowanym serwisie Braun lub w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Gwarancja:

- Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje na terenie całego kraju.
- Gwarancją nie są objęte :
 - Mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy.
 - Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby,
 - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek,
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji,
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
 - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych.
- Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego.
- Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego Braun, w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem.